

Găsiți mai multe
pe canalul nostru



Fabricat de SATELEC® (FRANCE) distribuit de COMEG.

COMEG Medical Technologies reprezintă
departamentul medical al ACTEON® Group.

- Peste **40 de ani de experiență** în chirurgia endoscopică
- Axat în mod special pe **Chirurgie minim invazivă (CMI)**
- **Prezență globală** pe 6 continente
- **Întrunește nevoile specifice** pentru GYN, URO, ENT, LAP, ARTHRO, CMF și chirurgie PLASTICĂ
- **Aduce intuitiv în atenția medicilor** soluțiile optime

COMEG proiectează soluții intuitive pentru chirurgia minim invazivă.

Contact local:



www.comegmedical.com

ZAC Athélia IV - Av. des Genévriers - 13705 La Ciotat cedex - France
info@comegmedical.com

Document recontractual – Ref. D57811 – V3 – 05/2017 – © 2016 COMEG – Toate drepturile rezervate.
Reproducerea sau transmiterea sub orice formă sau prin orice mijloc a oricărei informații sau părți ale acestui document fără permisiunea prealabilă a COMEG este interzisă.



Sigur și atraumatic

Dispozitive piezoelectrice cu ultrasunete pentru intervenții chirurgicale la nivelul oaselor



PIEZOTOME® SoloM+



PIEZOTOME® M+



IMPLANTCENTER™ M+

CERTIFICAT
PENTRU SALILE
DE OPERATII



• BENEFICIILE CLINICE ALE DISPOZITIVELOR PIEZOELECTRICE CU ULTRASUNETE • CHIRURGIE MINIM INVAZIVĂ

Piezo-chirurgia cu ultrasunete la nivelul oaselor a fost utilizată inițial de către chirurghi din domeniul cranio-maxilo-facial, fiind preluată ulterior în multe alte specialități datorită beneficiilor clinice extraordinare în ceea ce privește intervențiile chirurgicale orale și extra-orale:

Intraoperator

Siguranță


- Tăiere selectivă: țesuturile moi sunt protejate (nervi, artere, dura mater)
- Evitarea supraîncălzirii oaselor

Precizie

- Osteotomii subțiri și precise
- Maximizarea volumului osos.

Confort

- Lipsa vibrațiilor la nivelul instrumentului.
- Presiune joasă.

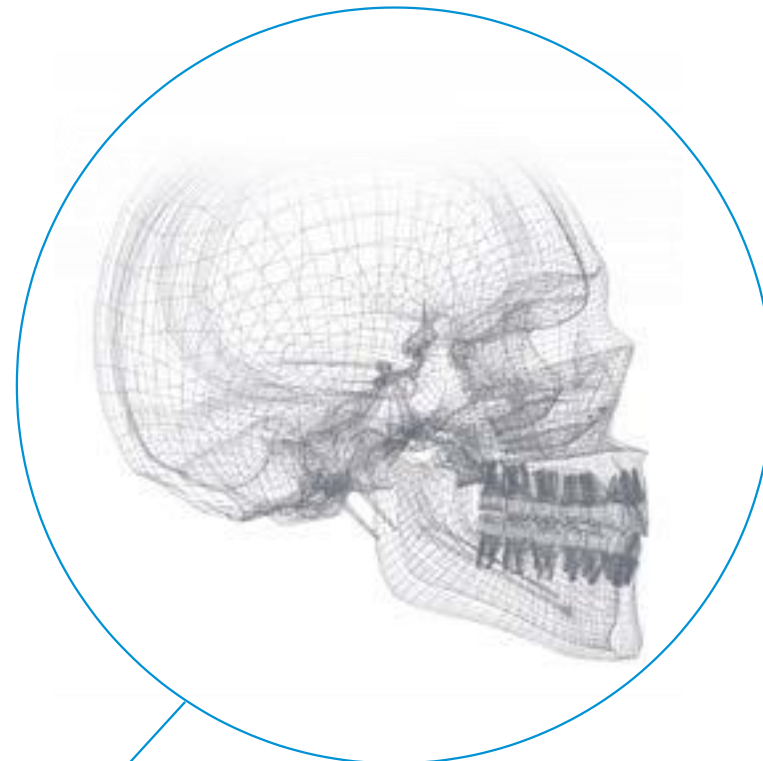

Post-operator

Finețe

- Durere diminuată
- Reducerea inflamației și a contuziei
- Rezultate mai naturale

Vindecare


- Favorizează regenerarea osoasă
- Recuperare rapidă
- Rezultate stabile pe termen lung

Siguranță

Generatorul produce o frecvență modulată cu valori cuprinse între 28 și 36 kHz. Amplitudinea semnalului este alternativ înaltă și joasă, cunoscută ca modulare tip PIEZOTOME®. Osul este tăiat la o frecvență aproape de frecvența sa de relaxare, limitând astfel riscul de a provoca leziuni structurilor anatomice fragile [nervi, artere]. Tăierea osului este precisă, regenerarea celulelor este optimizată, iar vindecarea este superioară calitativ. Tehnologia piezoelectrică cu ultrasunete se pretează oricărui tip de intervenție chirurgicală orală sau extra-orală, acolo unde **precizia și siguranța** sunt obligatorii.

Modularea tip PIEZOTOME

Amplitudine

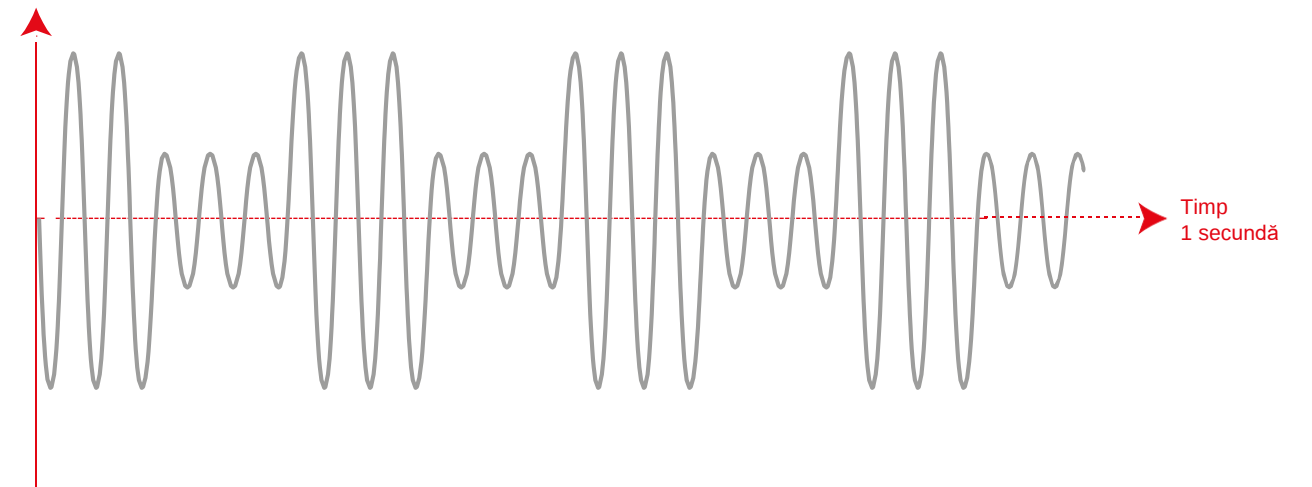

Referințe

- Gerbault O, Daniel RK, Kosins AM. **Rolul instrumentelor piezoelectrice în operațiile de rinoplastie.** Jurnalul de Chirurgie Estetică 2015;36(1):21-34.
- A. Troedhan, MD, DMD, PhD. **Rinoplastia cu ajutorul Piezotome reduce morbiditatea post-operatorie și sporește satisfacția pacienților: Un studiu clinic multidisciplinar.** Jurnal de chirurgie orală și maxilo-facială, Volumul 74, Ediția 8, 1659.e1 - 1659.e11
- Reside J, Everett E, Padilla R, Arce R, Miguez P, Brodala N, De Kok I, Nares S. **Analiza in vivo a vindecării oaselor ulterior utilizării instrumentelor cu ultrasunete PIEZOTOME®.** Cercetări clinice cu privire la implantul dentar 2015;17(2):384-94. Doi: 10.1111/cid.12094. Epub 2013 iunie 13.
- Compendium (la cerere). **Chirurgie piezo-electrică cu ultrasunete.**

• When Safety & Efficacy Matter

TEHNOLOGIA NEWTRON®

Potrivirea perfectă

Generatoarele de putere cu ultrasunete sunt pilotate de dispozitive electronice patentate de tehnologia NEWTRON®. Modulul electronic, instrumentul de lucru și vârfurile sunt perfect adaptate, astfel încât să asigure eficacitate și beneficii clinice extraordinare.

PROTEJARE

Protejarea țesuturilor moi

- Siguranță: protejarea țesuturilor moi (tipul de modulare piezo)

Protejarea oaselor

- Tăiere extrem de precisă
- Vibrații liniare ale vârfului
- Amplitudine controlată și constantă a vârfului

EFICACITATE

Ajustarea frecvenței

- Performanță maximă pentru fiecare vârf
- Eficiență optimă și constantă, indiferent de încărcătura aplicată.

Reglarea puterii

- Performanță constantă inclusiv în țesut osos dens
- Tăiere fără efort și fără presiune.

CONFORT

Atât pentru chirurg, cât și pentru pacient

- Siguranță la tăiere, fără efort
- Simț tactil sporit
- Durere post-operatorie redusă.

INTERVENȚII CHIRURGICALE MINIM INVAZIVE

Eficacitate

Curentul electric generează o deformare a inelelor piezoceramice. Mișcarea acestor inele duce la vibrații, astfel făcând vârful să vibreze într-o mișcare longitudinală constantă.

- Tehnologie electronică patentată
- 6 inele ceramice pentru un instrument de lucru îmbunătățit.



Puternicele noastre generatoare piezoelectrice extind gama de aplicare în ceea ce privește chirurgia.

When Safety & Efficacy Matter

• OPTAREA PENTRU ÎNALTA TEHNOLOGIE

Dispozitivele COMEG **dețin certificare pentru sălile de operații**. Aprobate de un organism autorizat independent, toate dispozitivele îndeplinesc cerințele celor mai înalte standarde legislative din domeniul medical. Dispozitivele electronice avansate previn interferența cu alte emisii.

Puteți afla mai multe de la inginerul în biomedicină cu care colaborați.

IMPLANTCENTER M+
Piezo • Ultrasonic • Surgery • Implantology Unit

PIEZOTOME M+
Piezo • Ultrasonic • Surgery • Unit

PIEZOTOME M+
Piezo • Ultrasonic • Surgery • Unit



ULTRASUNETE
CONCENTRATE



EXPERTUL ÎN
ULTRASUNETE



ALIEREA
TEHNOLOGIILOR

CERTIFICAT
PENTRU SALA DE OPERAȚIE

- Clasa IIb
- Conectare echipotențială
- Ediția IEC 60601-1 – 3rd
- Pedală certificată IPX6 & IPX8
- Marcă de siguranță BVS (doar USA)

Tehnologie

• ULTRASUNETE CONCENTRATE

PIEZOTOME® Solo M+, compact și eficient, înglobează toate componentele puternice, fiabile și sigure ale gamei M+ în vederea siguranței și a performanței maxime.

Indicații clinice

Aționează asupra țesutului tare, protejând țesutul moale.

Osteotomii la nivelul oaselor mici, osteoplastii, perforări, nivelări, acolo unde siguranța și precizia sunt esențiale.



Mod de pornire
de la d1 (cel mai
puternic) la d4

d1
d2
d3
d4



CERTIFICARE
PENTRU SĂLILE DE
OPERATII

PREVĂZUT CU:

- 1x consolă
- 5x conducte de irigare cu perforatoare de unică utilizare de 3m lungime
- 1x suport instrument
- 1x pedală IPX6 M+
- 1x cheie M+
- 1x cablu de alimentare de 3m

• ACCESORII CONECTATE

Instrumentul PIEZOTOME® M+ LED

- Instrument îmbunătățit: 6 inele ceramice
- Lumină LED rece pentru vizibilitate mare și nivel scăzut de căldură generată.
- Cablu cu lungimea de 3m adaptat mediului din sala de operații.



Pompă peristaltică pentru irigare controlată

- Instalare rapidă
- Robustă
- Debit precis și constant (pentru evitarea supraîncălzirii oaselor)
- Funcționare silențioasă



Pedală (certificare pentru sala de operații, cu garanție IPX6 împotriva jetului de apă)

Face posibil controlul asupra principalelor acțiuni, pentru a satisface mediul steril:

- Nivel de putere
- Ultrasunete PORNIT/OPRIT

PIEZOTOME® Solo M+

• EXPERTUL ÎN ULTRASUNETE

PIEZOTOME® M+ este un dispozitiv versatil. Conexiunea sa dublă permite conectarea a două instrumente de lucru, generând astfel proceduri clinice mai rapide. Ajustarea setărilor se face cu ușurință cu ajutorul ecranului tactil și a pedalei multifuncționale pentru un control perfect pe toată durata intervenției chirurgicale.

PIEZOTOME M+
Piezo • Ultrasonic • Surgery • Unit

Expertul în ultrasunete pentru intervenții chirurgicale sigure și rapide la nivel osos



Pedală (cu certificare IPX8 pentru sălile de operații, cu etanșeitate garantată)

Ușor de manevrat datorită formei arcuite, oferind control optim asupra funcțiilor principale:

- Setări ale puterii
- Selectarea instrumentului de lucru activ
- Mod PIEZOTOUCH™: reglarea progresivă a puterii

• ACCESORII CONECTATE

Instrumentul de lucru PIEZOTOME® M+ LED

- Capacitate de 2 instrumente
- Instrument îmbunătățit: 6 inele ceramice
- Lumină LED rece pentru vizibilitate mare și nivel scăzut de căldură generată.
- Cablu cu lungimea de 3m adaptat mediului din sala de operații.



Interfață tactilă

- Monitor cu dimensiunea de 5.7" îndreptat spre operator
- Setări facile și intuitive
- Funcție de memorie

PREVĂZUT CU:

- 2x console
- 5x conducte de irigare cu perforatoare de unică utilizare de 3m lungime
- 2x suporturi instrumente
- 1x pedală multifuncțională IPX8 M+
- 1x cheie M+
- 1x cablu de alimentare de 3m

CERTIFICARE
PENTRU SĂLILE DE
OPERAȚII

PIEZOTOME® M+

• ALIEREA TEHNOLOGIILOR

IMPLANTCENTER™ M+ reprezintă un concept unic, combinând puterea unui motor rotativ cu siguranța aparaturii dispozitivelor piezoelectrice. Astfel, asigură independență totală chirurgului și face posibilă realizarea unei multitudini de intervenții.

Alierea tehnologiilor pentru intervenții chirurgicale sigure și atraumatice la nivel osos.



CERTIFICARE
PENTRU SĂLILE DE
OPERATII

PREVĂZUT CU:

- 1x micromotor I-SURGE™ LED
- 2x console
- 5x conducte de irigare cu perforatoare de unică utilizare de 3m lungime
- 2x suporturi pentru instrumente
- 1x pedală multifuncțională IPX8 M+
- 1x cheie M+
- 1x cablu de alimentare de 3m

• DIVERSITATEA ACCESORIILOR CONECTATE

Alăturarea perfectă a tehnologiei rotative cu cea a ultrasunetelor.

Motorul rotativ

Trăsături

- Certificare cranio-maxilo-facială
- Durabil (motor fără perii), robust, nu necesită întreținere
- Fără vibrații
- Sterilizabil pentru aseptie perfectă.

Performanțe

- Echilibru perfect între cuplu și viteză pentru o stabilitate fără egal
- Cuplu mare: 6Ncm
- Viteză mare de rotație a motorului: 100 - 40.000Rpm



Instrumentul PIEZOTOME® M+ LED

- Instrument îmbunătățit: 6 inele ceramice
- Lumină LED rece pentru vizibilitate mare și nivel scăzut de căldură generată.
- Cablu cu lungimea de 3m adaptat mediului din sala de operații



Pedală (cu certificare IPX8 pentru sălile de operații, cu etanșeitate garantată)

Ușor de manevrat datorită formei arcuite, oferind control optim al principalelor funcții:

- Controlul unității globale
- Mod PIEZOTOUCH™: reglarea progresivă a puterii

IMPLANT CENTER™ M+

• ACCESORII

Performanța vine împreună cu componentele realizate special pentru asigurarea durabilității în timp.




Instrumentul – PUTERNIC

- Inele ceramice pentru intervenții chirurgicale mai rapide
- Lumină LED rece (100,000 Lux) pentru vizibilitate mare chiar și în zonele posterioare
- Lipsa supraîncălzirii
- Instrument ușor pentru manevrarea facilă și pentru diminuarea oboselii la nivelul mâinii.



Asepsie perfectă

- Complet sterilizabil (autoclavabil & lavabil - dezinfectabil)
- Capătul poate fi demontat cu ușurință pentru asepsie perfectă

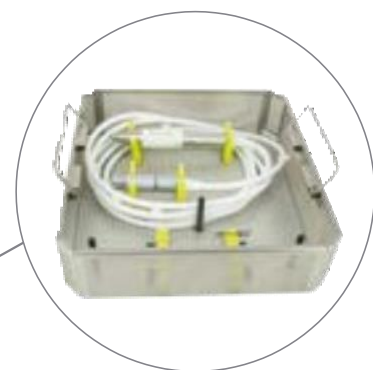

Toate într-un singur loc

- Livrat în propria cutie autoclavabilă din metal
 - Pregătit pentru sterilizare
- Ref. F57802**



Pompă peristaltică pentru controlarea irigației

- Instalare rapidă
- Robustă
- Debit precis și constant (evitarea supraîncălzirii oaselor)
- Funcționare silențioasă

Linie de irigare de unică utilizare

Ref. F57378 x1

Ref. F57379 set of 5



Pompa și irigare – SIGURE

Controlul perfect al irigației este necesar pentru:

- Înlăturarea resturilor osoase
- Reducerea riscului de necrozare a osului
- Generarea unui efect hemostatic datorită cavității (implozia microbulelor eliberează oxigen)



Vârfuri–ROBUSTE

- Create în armonie cu anatomia pacientului
- Sistem rapid de asamblare a șuruburilor: salvează timp pe durata operației
- Oțel inoxidabil folosit la aparatura medicală
- Consolidat prin tratamente termice și de suprafață
- Vârf sintetic diamantat
- Modalitate de sterilizare a vârfurilor: raze gama

Seturi și sfaturi

De unica utilizare, livrate sterile sau utilizabile de 5 ori, livrate nesterile

Conectat

CHIRURGIE CRANIO-MAXILO-FACIALĂ CU ULTRASUNETE

Chirurgia piezoelectrică reprezintă o nouă tehnică de tăiere a osului conferind siguranță sporită mai ales în zone anatomiche dificil de abordat.

Vibrațiile micrometrice asigură **osteotomii foarte înguste și precise** cu rezultate stabile pe termen lung într-o gamă variată de aplicabilitate.

Cranio


- Osteotomia sinusului frontal
- Craniosinostoză
- Grefă parietală

Maxilo

- Osteotomia LeFort I
- Osteotomia bilaterală sagitală (B.S.S.O)
- Genioplastie

Facial

- Osteotomia LeFort II & III
- Osteotomia osului zigosomatic
- Reconstrucție

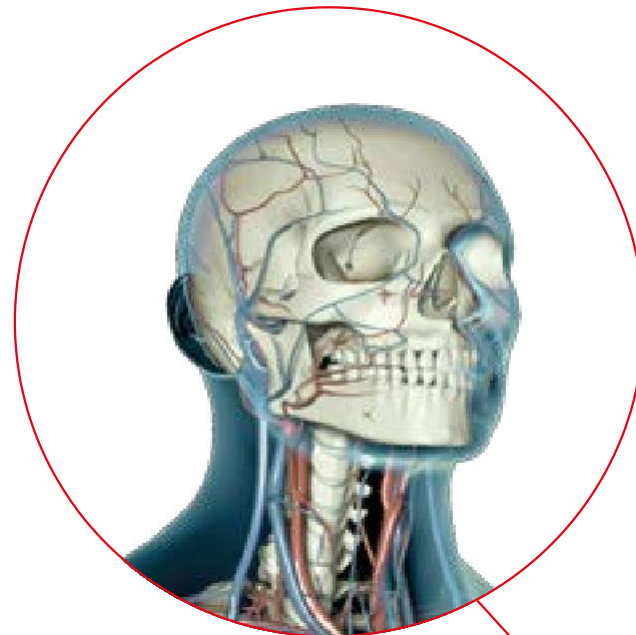

v.Prof.Dr.Dr. Troedhan, Vienna, Austria

"Dispozitivul Piezochirurgical M+, pentru prima dată în istoria Chirurgiei piezoelectrice asigură suficientă putere pentru o procedură chirurgicală rapidă în toate cazurile de osteotomii ample din chirurgia ortognatică, chirurgie de reconstrucție care necesită transplant mare de os din craniu și în chirurgia cosmetică a țesuturilor tari la nivel facial. Cu precizia sa de neegalat și lipsa traumelor în ceea ce privește tăierea oaselor, procedurile chirurgicale CMF pot fi cu ușurință finalizate într-un timp mai scurt decât în cazul instrumentelor rotative sau oscilante, cu pierderi de sânge substanțial diminuate. În cazul chirurgiei cosmetice, aplicarea protocoalelor cu ultrasunete nou dezvoltate asigură o scădere semnificativă a morbidității postoperatorii și sporesc satisfacția pacientului în raport cu rezultatul."

PENTRU INTERVENȚII MAI SIGURE ȘI DE ÎNALTĂ PRECIZIE



CMFkit	BS1L	BS2LXL	BS2RXL	BS1RD	SL1	BS4
F57803	F87612	F87605	F87606	F87608	F87618	F87615
F57804	F87982	F87983	F87984	F87985	F87974	F87978

- 5x reutilizabil
- De unică folosință

BS1L-fierăstrău

Fierăstrău (0.6mm) cu marcare cu laser la 3, 6, 9, 12 și 15mm

- Osteotomie adâncă

BS2LXL&BS2RXL-fierăstrău îndreptat stânga dreapta

Fierăstraie lungi laterale (lungime de 39.5mm) pentru ușurarea accesului în funcție de anatomia pacientului

- Osteotomie

BS1RD-Fierăstrău rotunjit

Cu forma sa rotunjită, acest vârf este activ pe o suprafață de 280°, iar lungimea sa (40mm) face posibilă abordarea zonelor posterioare cu ușurință

SL1-Diamantat

- Intervenție la nivelul osului vestibular
- Netezirea unghiurilor ascuțite
- Incizii la nivel osos în apropierea zonelor delicate

BS4-Scalpel circular

- Osteoplastie
- Recoltarea osului

Intervenție ortognatică



Prin bunăvoința Dr Troedhan, Vienna, Austria

Operație craniană



Prin bunăvoința Dr Solyom, Toulouse, France

● RINOPLASTIE DESCHISĂ CU ULTRASUNETE ● IMPORTANT: SFATURI DE RINOPLASTIE DE LA GERBAULT

O procedura mai blândă și mai puțin traumatică oferind remodelarea precisă a osului și rezultate controlabile pe termen lung.

Tratamentul concret al osului

- Noul protocol de rinoplastie cu ultrasunete permite corecții automate (nas prea tare, prea lat sau deformat) fără fracturi nedorite nici măcar la nivelul oaselor înguste, fragile sau instabile.

Viziune

- Operație efectuată vizând înalta precizie.

Recuperare rapidă

- Reintegrare mai rapidă în viața socială: mai puține echimoze și edeme cu rezultate mai naturale.


Rinosculptură cu ajutorul ultrasunetelor

Vârfurile RHS2H și RHS2F sunt prevăzute să sculpteze oasele fără a le fractura.



Dr Gerbault MD, Vincennes, France

"Chirurgia piezoelectrică are un impact major în rinoplastie, permițând o schimbare de paradigmă în ceea ce privește remodelarea oaselor prin rinoplastie. Simplifică în mod semnificativ procedura de reducere a osului nazal și osteotomiile în rinoplastie și adaugă o nouă dimensiune, dând posibilitatea sculpturii și a netezirii osului nazal. Oasele stabile pot fi poziționate în câmpul vizual cu o acuratețe nemaipomenită și remodelate astfel încât să se obțină o simetrie perfectă și oase netede. Mai mult, această tehnică este simplă, ușor de studiat, simplu de predat și cu o recuperare foarte rapidă, datorită diminuării semnificative a echimozei post operatorii. Pentru prima dată în istoria rinoplastiei, remodelarea personalizată a oaselor nazale este ușor de atins.. "

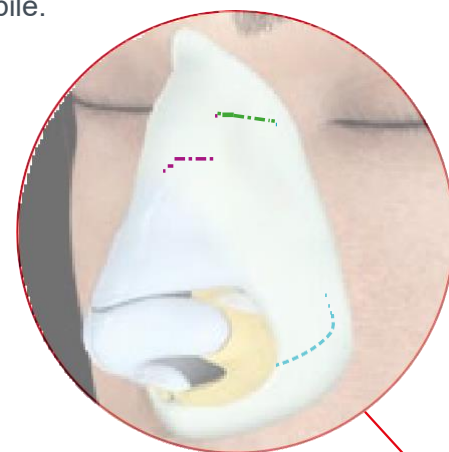

Rinoplastie cu osteotomii precise

--- Osteotomie laterală – RHS3L sau RHS3R

--- Osteotomie transversală – RHS3L sau RHS3R

--- Osteotomie oblică mediană – RHS5



Rinoplastie GerbaultKit

F87681

RHS2H

F87676

RHS2F

F87675

RHS3L

F87677

RHS3R

F87678


RHS5

F87679

RHS6

F87680

• 5x reutilizabil

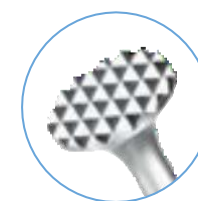

RHS2H-Pilă tare

Folosirea pe țesut epitelial gros sau în os dens

- Remodelarea fișă a piramidei nazale
- Îndepărtarea proeminenței osoase
- Netezirea neregularităților osoase
- Netezirea grefei osoase sau de cartilaj tare

RHS2F-Pilă fină

Folosirea în cazul pielii sau oaselor subțiri.

RHS3L&RHS3R-Fierăstraie rotunjite

Fierăstraie îndreptate spre stânga dreapta

- Osteotomii laterale și transversale

RHS5-Fierăstrău subțire

Fierăstrău subțire drept

Osteotomie oblică mediană

Grefă de cartilaj costal



Prin bunăvoința
Dr Gerbault, Vincennes, France

RHS6-Burghiu diamantat


Vârf diamantat prevăzut pentru osul nazal

Forare sau forarea osului nazal

- Sutura oaselor
- Sutura septului

● EXPERȚII : SFATURI DE RINOPLASTIE DE LA GERBAULT

Expert Kit presupune un acces fără precedent la nivel osos și permite tratarea sigură a septului. Fiecare vârf a fost conceput astfel încât să poată răspunde tuturor pașilor tratamentului osos în rinoplastie, atât estetici, cât și funcționali, de la accesul și tăierea osului până la tratarea septului, cu o vedere clară și neobstrucționată. Astfel, orice convexitate sau asimetrie a osului poate fi evaluată și tratată.

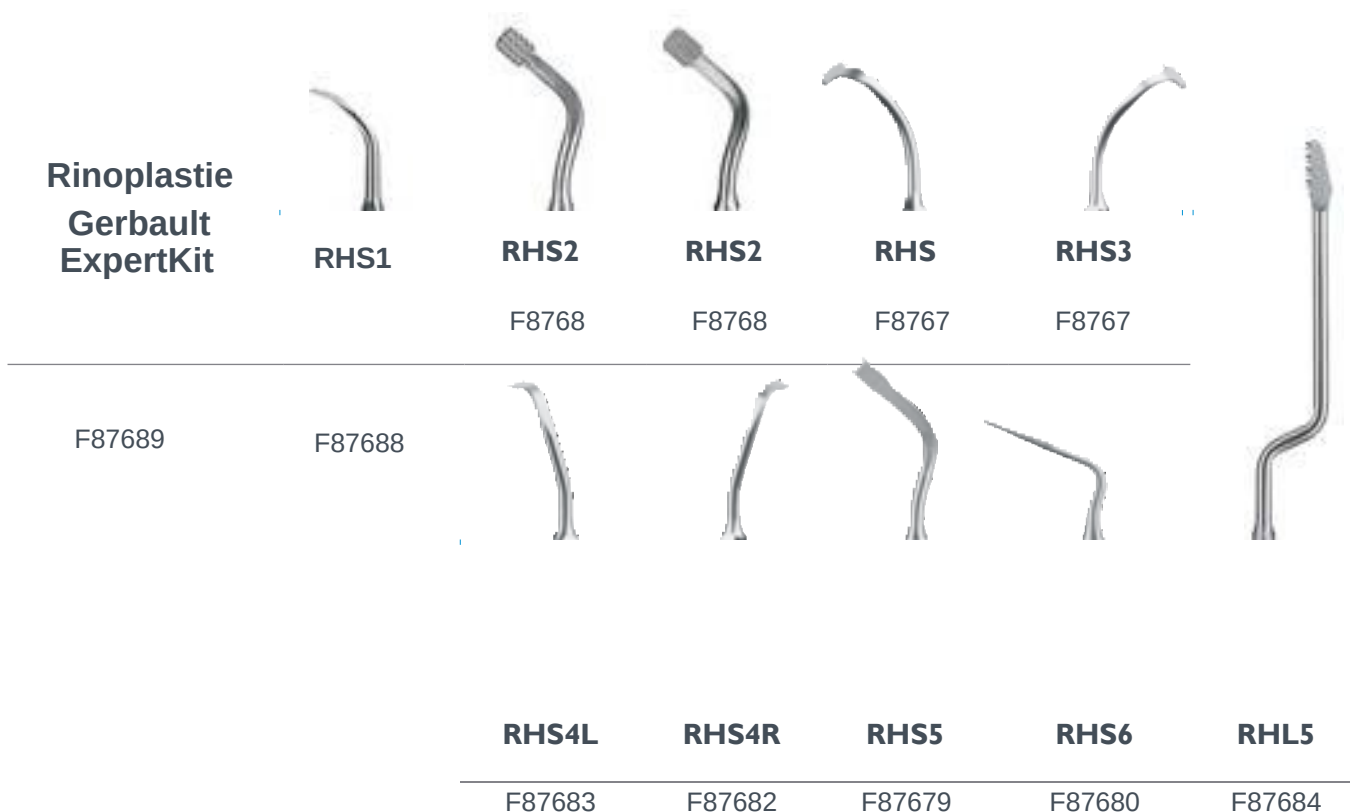


Dr Gerbault MD, Vincennes, France

"Rinoplastia s-a schimbat dramatic de la apariția rinoplastiei cu ultrasunete: de la o abordare aproape oarbă, cu oase tăiate și rupte cu riscul unor fracturi nedorite, a devenit o operație controlată, vizibilă în întregime, prin care oasele sunt remodelate și mobilizate fără ca stabilitatea lor să fie alterată. Acest control precis asupra formei, poziției și fineții oaselor este posibil datorită utilizării instrumentelor piezoelectrice prin expunerea extinsă sub periostală a întregului ansamblu osos și este sigură datorită faptului că nu distruge țesuturile moi și protejează susținerea oaselor. Rinoplastia cu ajutorul ultrasunetelor reprezintă o procedură simplă. Netezimea părții dorsale și a osului nazal se obține folosind fierăstraie și răzuitoare foarte subțiri. Oasele pot fi forate pentru sutura cartilajelor de oase, pentru schimbarea orientării sau pentru îmbunătățirea stabilității. În sfârșit, vârfurile piezoelectrice lungi permit îndreptarea septului sau recoltarea unor părți lungi din sept fără riscul destabilizării acestuia. Chirurgia piezoelectrică face parte din actualele evoluții ale chirurgiei secolului 21: rinoplastia estetică și cea funcțională sunt profund influențate de această tehnologie inovativă"

● PREVĂZUT PENTRU TOATE TIPURILE DE NASURI

COMEG a miniaturizat instrumentele de rinoplastie pe care le-a asociat cu dispozitivele piezoelectrice cu ultrasunete M+, permițând remodelarea și mobilizarea oaselor fără a sacrifica stabilitatea acestora, asigurând protecția țesuturilor moi.

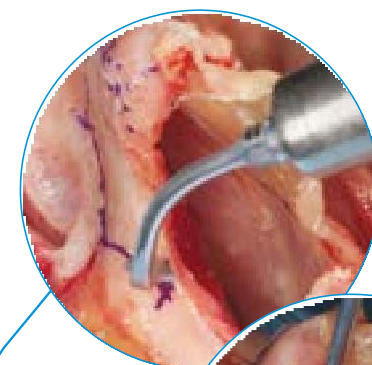

RHS1-Răzuitor

Vârf curbat pentru îndepărtarea excesului osos: osteotomie în țesut dens sau la nivelul țesutului epitelial gros

- Remodelarea piramidei nazale
- Corectarea profilului nazal și a convexității laterale.

RHS2Hb-Pilă tare

Se folosește pentru pielea groasă sau oasele dense

RHS2Fb-Pilă fină

Se folosește în cazul pielii sau oaselor subțiri

- Remodelarea fină a piramidei nazale
- Îndepărtarea proeminenței osoase
- Nivelarea neregularităților osoase
- Netezirea grefei osoase și a cartilajelor tari

RHS3L&RHS3R-Fierăstraie rotunjite

Fierăstraie îndreptate spre stânga dreapta

- Osteotomii laterale

RHS4L&RHS4R-Fierăstraie unghiulare

Fierăstraie îndreptate spre stânga dreapta

- Osteotomii transversale
- Grefă parțială de cartilaj costal

RHS5-Fierăstrău drept

Fierăstrău drept subțire

- Osteotomie oblică mediană
- Grefă de cartilaj costal

RHL5-Fierăstrău lung

Fierăstrău lung, drept pentru tratarea septului

- Osteotomie cefalică
- Osteotomie caudală

RHS6-burghiu diamantat

Vârf diamantat destinat forării osului nazal sau a spinei nazale

- Sutura osului
- Sutura septului



Prin bunăvoința Dr Gerbault, Vincennes, France

• O GAMĂ COMPLETĂ ȘI DIVERSIFICATĂ

OSTEOTOMIE/ OSTEOPLASTIE

Tăietură
corespunzătoare și
subțire pentru
maximizarea
volumului osos
Ref. F57805

BS1S	BS2L	BS2R	BS4	BS5	BS6
F87611	F87613	F87614	F87615 F87978	F87616	F87617

RIDICAREA SINUSULUI LATERAL

Confort maxim: tăietură
selectivă și hemostatică

Ref. F57806

SL1	SL2 SL5	SL3	SL4	
F87618 F87974	F87619 F87973	F87620 F87972	F87621	F87622

SINDESMOTOMIE

Pentru protecția
maximă a osului
Ref. F57809

LC1	LC1-90°	LC2	LC2L	LC2R	NINJA®
F87623	F87624	F87625	F87626	F87627	F87628

EXTENSIE CORONARIANĂ

Precizie și accesibilitate excelentă.
Ref. F57810

BS6	CE1	CE2	CE3
F87617	F87651 F87653	F87652	

DESPICAREA CORNETELOR

Tehnică rapidă și minim
invazivă pentru
controlarea expansiunii

Ref. F57808

CS1	CS2	CS3	CS4	CS5	CS6
F87629	F87630	F87631	F87632	F87633	F87634

RIDICAREA SINUSULUI CORONARIAN

Chirurgie minim invazivă
pentru fracturi fine la nivelul
sinusului.

Ref. F57807

TKW1	TKW2	TKW3	TKW4	TKW5
F87641	F87642	F87643	F87644	F87645

FORAREA ȘI REMODELARE A OSULUI

DB1	DB2
F87610	F87609

ACCESUL ADÂNC ÎN OS

LC1XL
F87607

Vârfuri lungi

Pentru tehnici minim invazive și
acces mai ușor.

BS1XXL

F87602
F87986

BS6XXL

F87604
F87987

Expertiză clinică